




# Sensitest®

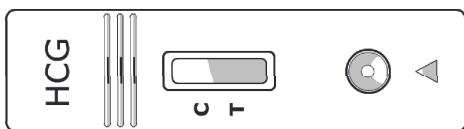

© Sensitest - hCG Cassette

- Zwangerschapstest met hoge gevoeligheid.
- Pregnancy test with a high sensitivity.
- Zelftest voor thuisgebruik.
- For self testing at home.

## Gebruiksaanwijzing Sensitest Zwangerschapstest cassette (hCG)

Lees voor je begint met testen de gehele gebruiksaanwijzing door. Zodra je zwanger bent, produceert je lichaam het zwangerschapshormoon humaan Chorion Gonadotrofine (hCG). De hoeveelheid hCG verdubbelt elke 2 à 3 dagen en bereikt een piek na ongeveer 7 à 12 weken zwangerschap. Deze test detecteert het zwangerschapshormoon in je urine. De Sensitest zwangerschapstest cassette is een zeer gevoelige zwangerschapstest en kan de aanwezigheid van hCG al aantonen voordat je ongesteld moet worden. Om een betrouwbare uitslag te verkrijgen, raden wij echter aan om de test uit te voeren vanaf de dag dat je je menstruatie verwacht. Als je een regelmatige cyclus hebt, kun je de Sensitest zwangerschapstest cassette gebruiken vanaf de dag je je menstruatie verwacht. Bij een onregelmatige cyclus ga je uit van de langste cyclus die je in het afgelopen half jaar hebt gehad.

**Het tijdstip** De test kan op ieder moment van de dag worden uitgevoerd.

### Benodigheden als je gaat testen

1. Een gesloten folieverpakking met een Sensitest zwangerschapstest cassette. Gebruik geen zwangerschapstest uit een geopende of beschadigde verpakking.
2. Een schoon en droog opvangbakje.
3. Urine van de vrouw waarbij de zwangerschap moet worden vastgesteld.

### De test in 7 stappen

1. Neem een gesloten verpakking en controleer of er "Zwangerschapstest" op staat. Gebruik geen test waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
2. Vang wat urine op in een schoon bakje.
3. Maak het pakje met de test open met droge en schone handen.
4. Leg de cassette plat neer op een droge vlakke ondergrond, met het venster naar boven.
5. Zuig met behulp van het pipetje dat je in het pakje vindt wat urine uit het bakje op.
6. Druppel 6 druppels urine in de ronde uitsparing (gemarkeerd met een driehoekje) in de cassette.
7. Laat de cassette liggen en wacht 5-10 minuten om de resultaten af te lezen. Het is belangrijk dat de achtergrond geen verkleuringen meer laat zien. Wacht niet langer dan 30 minuten met het aflezen van de testresultaten.

### Resultaat van de test

- Het resultaat is **negatief** als er één lijn verschijnt (afbeelding 1). Dit is de controlelijn (C) om te zien of de test juist is uitgevoerd. De testlijn (T) is niet zichtbaar. Je bent niet zwanger.
- Het resultaat is **positief** als er twee lijnen te zien zijn (afbeelding 2). Er is een duidelijke controlelijn (C) zichtbaar en er is een testlijn (T) zichtbaar. Ook bij een lichte testlijn is er hCG waargenomen in je urine. Je bent zwanger (afbeelding 3).

### Resultaat: geen lijnen

- Als er geen lijnen te zien zijn, is de test waarschijnlijk onjuist uitgevoerd. Mogelijk is er te weinig urine door de zwangerschapstest opgenomen. Druppel nogmaals enkele druppels urine in het opvangvat.

### Als de uitslag negatief is (niet zwanger)

Indien de test aangeeft dat je niet zwanger bent, heeft de Sensitest zwangerschapstest cassette geen zwangerschapshormoon kunnen aantonen. Je bent niet zwanger of de kans bestaat dat je de test te vroeg hebt uitgevoerd. Je kunt na 3 dagen opnieuw een test uitvoeren. Als je ondanks een negatieve uitslag niet binnen een week menstrueert, adviseren we om contact op te nemen met je huisarts.

### Als de uitslag positief is (wel zwanger)

Als de test aangeeft dat je zwanger bent, is het verstandig om dit aan je huisarts te melden om de juiste begeleiding te krijgen tijdens je zwangerschap.

**Zeer licht testresultaat.** Heb je een zeer lichte testlijn, herhaal de zwangerschapstest na ten minste 48 uur.

### Beperking 1: Na een zwangerschap of miskraam

Na een bevalling of een miskraam duurt het ongeveer 9 weken voordat het zwangerschapshormoon hCG volledig uit je lichaam is verdwenen. Tot deze tijd geeft de zwangerschapstest een positief resultaat, terwijl je niet zwanger bent. Ook na een steriliteitsbehandeling, gebaseerd op hCG, kan de zwangerschapstest een foutieve testuitslag geven. Raadpleeg je huisarts.

### Beperking 2: Betrouwbaarheid van zwangerschapstest

Met een betrouwbaarheid van 99% is de Sensitest zwangerschapstest cassette net zo betrouwbaar als een vergelijkbare test van je huisarts. Toch kan alleen je huisarts een zwangerschap bevestigen na overweging van klinisch onderzoek en laboratorium testen. Je persoonlijke medische situatie kan de uitslag van deze test beïnvloeden. Raadpleeg bij zwangerschap of bij twijfel over een zwangerschap altijd je huisarts.

### Beperking 3: Gebruik van alcohol

Alcohol kan het testresultaat beïnvloeden. Doe geen zwangerschapstest na het drinken van alcohol.

### Beperking 4: Oorzaak verhoogd niveau hCG

Een verhoogd niveau hCG hoeft niet alleen door zwangerschap te worden veroorzaakt. Dit moet worden uitgesloten voordat een zwangerschap kan worden vastgesteld met urine.

### Beperking 5: Toepassing van de test

Deze test is alleen te gebruiken met opgevangen urine. Wil je een zwangerschapstest om in de urinestraal te houden, neem dan de Sensitest zwangerschapstest midstream.

### Beperking 6: Drink niet te veel

Het drinken van veel water of andere vloeistoffen kan leiden tot een verwatering van de urine en daardoor een onduidelijke testuitslag. Het wordt daarom aangeraden om tijdens het testen niet uitzonderlijk veel te drinken. Stop bij voorkeur met drinken circa 2 uur voordat je een test wilt uitvoeren. Als een urinemonster te waterig is, kan de testuitslag negatief zijn. Als toch een zwangerschap wordt verondersteld, herhaal de test na 48 uur.

**Beperking 7: Beoordeling van de testresultaten** Een normale zwangerschap kan niet worden onderscheiden van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap gebaseerd op het hCG niveau in urine. Een vroegtijdige of gemiste abortus kan leiden tot eerst een licht positieve en later negatieve testresultaten.

### Beperking 8: Testen voor je menstruatie

De Sensitest zwangerschapstest heeft een hoge gevoeligheid en kan al voor je menstruatie hCG aantonen in je urine. De test heeft echter een hogere betrouwbaarheid wanneer je de test uitvoert op de dag dat je je menstruatie verwacht of later. Indien je vóór je menstruatie de Sensitest zwangerschapstest uitvoert, wordt aangeraden om nog een zwangerschapstest uit te voeren op de dag dat je je menstruatie verwacht.

*Tekst van deze gebruiksaanwijzing is herzien op 29 oktober 2013. Versie 1.5*

## Directions for use Sensitest Pregnancy test cassette (hCG)

Carefully read the directions for use before you start testing. As soon as you are pregnant, your body produces the pregnancy hormone human Chorionic Gonadotrophin (hCG). The quantity of hCG doubles every 2 to 3 days and reaches a peak after some 7 to 12 weeks of pregnancy. This test detects the pregnancy hormone in your urine. The Sensitest pregnancy test cassette can already show the presence of hCG before you have your period. However, to obtain a reliable result, we recommend carrying out the test from the day that you expect to menstruate. If you have an irregular cycle, you must use the longest cycle you have had during the past six months as a criterion.

**Timing** The test can be carried out at any time of day.

### What you need before you start testing

1. A sealed foil package with a Sensitest pregnancy test cassette. Do not use a pregnancy test from an opened or punctured pack.
2. A clean, dry receptacle or plastic cup.
3. Urine from the woman whose pregnancy must be confirmed.

### The test in 7 steps

1. Take a closed pack and check that it indicates "Pregnancy test". Do not use a test that has passed its shelf life.
2. Collect a little urine in a clean cup.
3. Open the pack with the test with dry, clean hands.
4. Place the cassette on a flat, dry base.
5. Using the sample dispenser (pipette), withdraw some urine from the cup.
6. Slowly dispense 6 drops of urine into the hole of the cassette marked by a small triangle.
7. Wait 5-10 minutes before reading the result. It is important that the background is no longer discolored. However, do not wait more than 30 minutes before reading the result.

### Test result

- The result is **negative** if a single line appears (image 1). This is the control line (C) to see whether you have carried out the test correctly. The test line (T) not visible. You are not pregnant.
- The result is **positive** if two lines appear (image 2). You can clearly see a control line (C) and a test line (T). Even if the test line is faint, hCG has been detected in your urine. You are pregnant (image 3).

### Result: no lines

- If no lines are visible, the test has probably been carried out incorrectly. The cassette has possibly absorbed too little urine. Again dispense a few drops of urine into the hole.

### If the result is negative (not pregnant)

If the test indicates that you are not pregnant, the Sensitest pregnancy test cassette has been unable to demonstrate the pregnancy hormone. You are not pregnant or you may possibly have carried out the test too early. You can carry out the test again after 3 days. If despite a negative outcome you do not menstruate within one week, we advise you to contact your family doctor or gynaecologist.

### If the result is positive (you are pregnant)

If the test indicates that you are pregnant, you should advise your family doctor in order to receive the correct attention during your pregnancy.

**Very light test result:** If the test line (T) is very light you could carry out a new pregnancy test after 48 hours.

### Restriction 1: Following pregnancy, miscarriage, sterility treatment

It takes around 9 weeks after confinement or miscarriage before the hCG pregnancy hormone has disappeared entirely from your body. Up to that point the pregnancy test produces a positive result although you are not pregnant. Sterility treatments, based on hCG, may cause false results. Consult your physician.

### Restriction 2: Reliability of the pregnancy test

With a 99% reliability, the Sensitest pregnancy test cassette is just as reliable as a comparable test by your family doctor. Nonetheless, only your family doctor or gynaecologist can provide absolute certainty as to whether you are pregnant or not. Your personal medical situation may influence the result of this test. Always consult your family doctor if in doubt about a pregnancy.

### Restriction 3: Do not use alcohol

Alcohol may influence the test result. Do not use pregnancy tests after taking alcohol.

### Restriction 4: Elevated levels of hCG

Elevated levels of hCG can be caused by a few conditions other than pregnancy. Therefore, the presence of hCG in urine specimen should not be used to diagnose pregnancy unless these conditions have been ruled out.

### Restriction 5: Applying the test

This test may be used only with collected urine. If you require a pregnancy test to hold in the urine stream, use the Sensitest pregnancy test midstream.

### Restriction 6: Do not drink too much

Drinking large amounts of water or other liquids like coffee or tea could dilute your urine and produce light or unclear test results. You are advised to restrain from drinking large quantities of liquids during your testing period. Preferably stop drinking 2 hours before testing. When a urine sample is too dilute, the test result could be negative. If pregnancy is still suspected, another urine specimen should be collected 48 hours later and tested again.

### Restriction 7: Interpretation of the test results


A normal pregnancy cannot be distinguished from an ectopic pregnancy based on hCG levels alone. A spontaneous miscarriage or missed abortion could give at first a light positive and later negative test results.

### Restriction 8: Testing before your period starts

The Sensitest pregnancy test can demonstrate hCG in urine before you expect your period. However, the test result is more reliable when tested on the day you expect your period or later. If you carry out a Sensitest pregnancy test before your period begins, you are advised to do another pregnancy test on the day you expect your period.


The text of these directions for use was revised on 29 October 2013. Version 1.5

**Afbeelding 1: Niet zwanger • Image 1: Not pregnant**

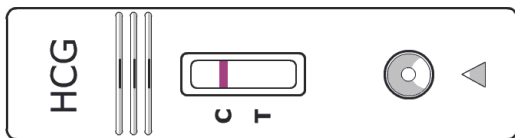


© Sensitest - hCG Cassette

**Afbeelding 2 en 3: Zwanger • Image 2 and 3: Pregnant**

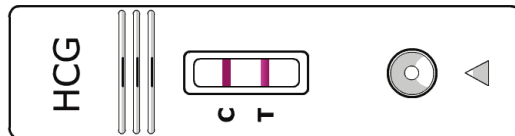

© Sensitest - hCG Cassette

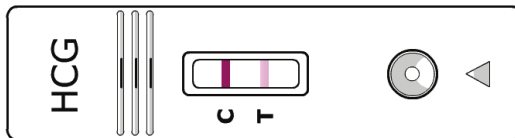

© Sensitest - hCG Cassette

**IVD**

Voor in-vitro diagnostisch gebruik. Voor extern gebruik, niet inslikken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

*For in vitro diagnostic use. For external use only, do not swallow. Keep out of reach of children.*



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.  
*Read instructions for use before testing.*



De test is eenmalig te gebruiken.  
*For non recurring use.*



Bewaren tussen de 4 en 30 graden celsius in gesloten folieverpakking. Bescherm tegen hitte. Niet invriezen.

*Keep between 4 and 30 degrees Celsius in a sealed pouch. Protect from heat. Do not freeze.*



Bescherm tegen vochtigheid.  
*Protect from humidity.*



Bescherm tegen zonlicht.  
*Protect from direct sunlight.*



Uiterste gebruiksdatum.  
*Final use-by date.*



**Gefabriceerd door / Manufactured by:**

Sensitest - Distributieweg 54  
2645 EJ Delfgauw - The Netherlands  
Tel +31(0)153642121 - www.sensitest.nl

**CE 0344**  **Sensitest®**