



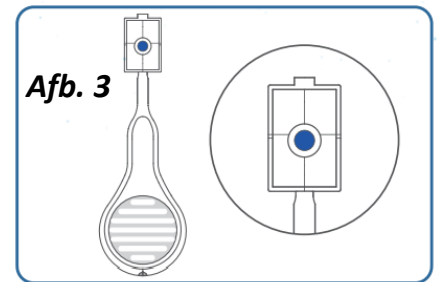

V-CHEK SNELLE INSTRUCTIEGIDS (NL) COVID-19 AG LOLLIPOP ZELFTEST

Inhoud: V-Chek Antigeen zelftest cassette, lollipop speeksel stick, gebruiksaanwijzing.
Deze snelgids is geen vervanging van de technische gebruiksaanwijzing.


1. Was de handen met zeep. Droog de handen af. Niet eten, niet drinken en niet roken tenminste 30 minuten voor afname van de test.
2. Zorg er voor dat de onderdelen van de test op kamertemperatuur zijn. Haal de V-Chek zelftest cassette uit de folieverpakking. Plaats de testcassette op een horizontale ondergrond (afb. 1).
3. Haal de lollipop speekselstick uit de verpakking.
4. Neem het speekselmonster af door de stickzijde met het sponsje in de mond te houden. Veeg actief de binnenkant van de mond en tong af om speeksel te verzamelen. Niet bijten op de spons (afb. 2).
5. Ga hiermee door gedurende circa 90 seconden totdat de spons zacht is, of de indicatorpunt op de spons blauw kleurt (afb. 3).
6. Druk de sponszijde van de speekselstick in het rechthoekige gat van de testcassette. Klik de stick vast in de houder. (afb. 4).
7. Het speeksel met het antigeen monster wordt nu uit de spons opgenomen door de test.

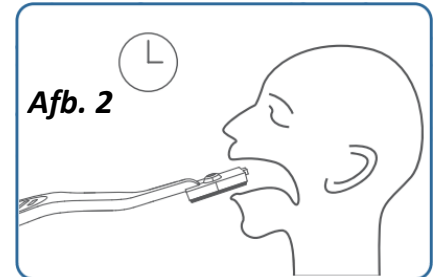

8. Wacht 15 minuten voordat je de testuitslag afleest. Lees het testresultaat tussen de 15 en 20 minuten af. Een testuitslag die na 20 minuten verschijnt is niet meer geldig.



Uitslag

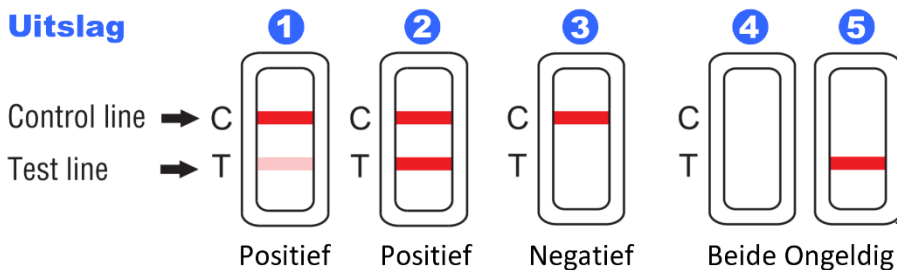


Als de testuitslag positief is

Ga in thuisisolatie en vermijd contact met andere personen. Ontvang geen bezoek. Neem contact op met de plaatselijke gezondheidsdienst en laat je testen met een PCR test. Heb je meer zorg nodig, neem dan contact op met je huisarts.

Als de testuitslag negatief is

Hou je aan de regels voor afstand houden, hygiëne en mondkapjes dragen daar waar dat is voorgeschreven. Een negatieve testuitslag is geen garantie dat je het virus niet bij je draagt. Soms kan de sneltest lage virus waarden niet waarnemen.

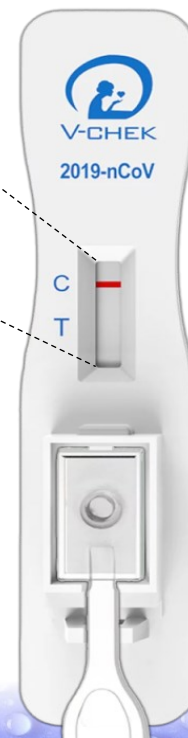

Jouw
test



V-CHEK QUICK GUIDE - TIPS AND TRICKS COVID-19 ANTIGEN LOLLIPOP SELFTEST (EN)

Content: V-Chek Test cassette, Lollipop saliva stick, Instructions for use.
This guide is not a replacement for the technical instructions for use (IFU).

1. Wash your hands with soap. Dry your hands. Do not eat, drink or smoke at least 30 minutes before testing.
2. Make sure the test parts are at room temperature. Remove the V-Chek self-test cassette from the foil pouch. Place the test cassette on a horizontal surface (*image 1*).
3. Remove the lollipop stick from the foil pouch.
4. Take the saliva sample by holding the stick side with the sponge in the mouth. Actively wipe the inside of the mouth and tongue to collect saliva. Do not bite the sponge (*image 2*).
5. Continue this for approximately 90 seconds until the sponge is soft or the indicator tip on the sponge turns blue (*image 3*).
6. Press the sponge side of the saliva stick into the rectangular hole of the test cassette. Click the stick into the holder (*image 4*).
7. The saliva containing the antigen sample is now absorbed from the sponge by the test.



Image 1

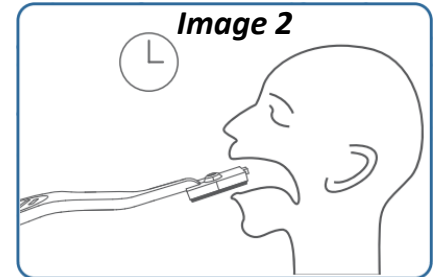


Image 2

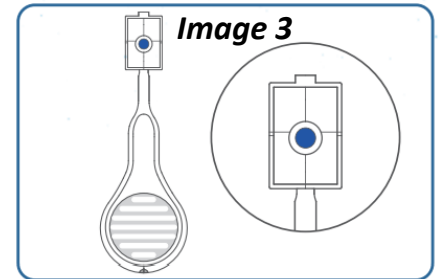


Image 3



8. Wait 15 minutes to read the test result. Read the test result between 15 and 20 minutes. Any test result after 20 minutes is invalid.

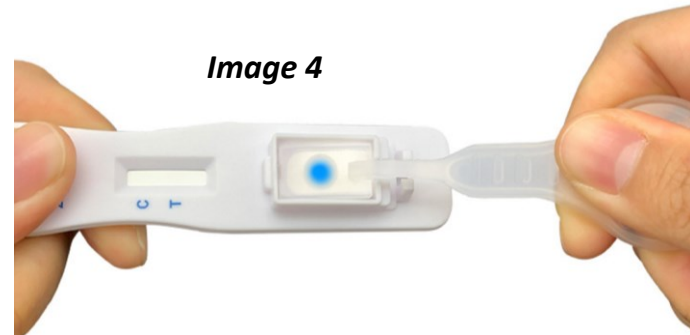


Image 4


When the test result is positive

Go into home isolation and avoid contact with other people. Contact the public health authority and have yourself tested at a testing facility with a PCR test. If you need more care, please contact your doctor or GP.

When the test result is negative

Stick to the rules for keeping your distance, hygiene and wearing face masks where they are required. A negative test result is not a complete guarantee that the virus is not detected. In some cases the rapid test cannot detect low viral concentrations.

Test result

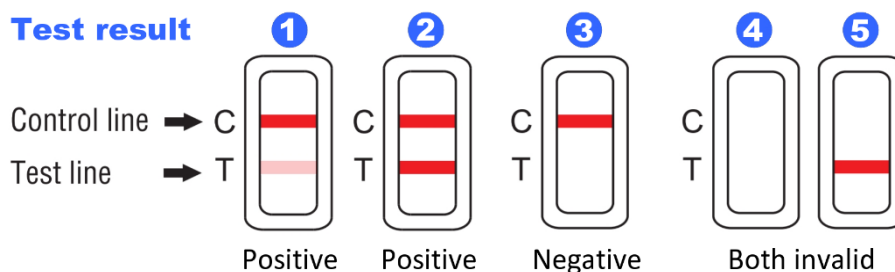

Your test